


FIXATION AND CONCENTRATION OF FAECAL PARASITES “AQUISFEK”

New compact design of Aquisfek device, which allows an easy and convenient sample collection, a safe transportation with an easier handling system and a more effective filtration.

FIJACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PARÁSITOS FECALES “AQUISFEK”

Nuevo diseño compacto del dispositivo Aquisfek, el cual permite una recogida de la muestra fácil y cómoda, un transporte seguro con un sistema de manipulación más sencillo y una filtración más eficaz.

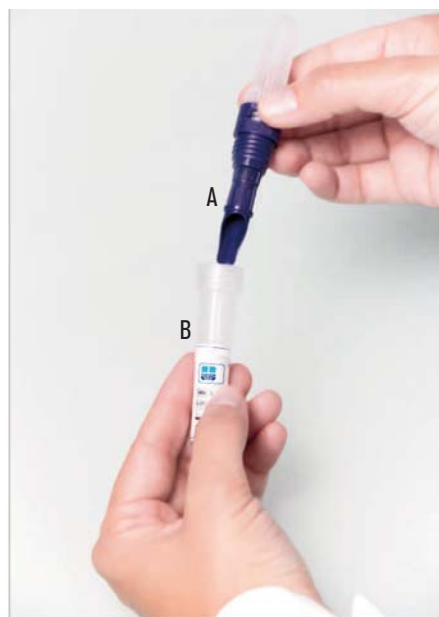

Procedure

SAMPLE COLLECTION.

EASY TO HANDLE BY THE PATIENT.

Separate the two parts (A and B) of the device and with the aid of the spoon built-in at the end of the filter, collect the sample.

Introduce the spoon with the sample back into the liquid and screw to close.

PROCESSING THE SAMPLES IN THE LABORATORY.

FAST AND EASY.

Once the sample has been homogenized, the whole device is centrifuged.

After centrifugation, discard the part A (spoon) and with the aid of a pipette, remove the supernatant in the tube (Part B).

The concentrated sample residue is transferred to a slide for a further microscopic observation.

TWO DIFFERENT FORMATS.

KIT 1. WITH FORMALIN / ACETATE. PARASITE COMMONL FIXER.

KIT 2. WITHOUT FORMALIN TO MINIMIZE THE RISK OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION.

KIT 1.

Part number

1800402 72 units supplied (24 units with 3 units in each bag) .

1800404 100 individual units supplied.

KIT 2. Without formalin.

Part number

1800400 72 units supplied (24 units with 3 units in each bag) .

1800401 100 individual units supplied.

Metódo de utilización

RECOGIDA DE LA MUESTRA.

GRAN SENCILLEZ DE MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE.

Separar las dos partes (A y B) del dispositivo y con ayuda de la cucharilla incorporada al filtro coger la muestra.

Introducir y cerrar el sistema.

PROCESO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO.

FÁCIL Y RÁPIDO.

Después de homogenizar la muestra, sin extraerla del tubo de recogida, se centrifuga el dispositivo.

Desechar la parte de la cuchara del dispositivo (Parte A) y separar, con una pipeta, el sobrenadante del tubo (Parte B).

El residuo centrifugado se transfiere a un porta para la observación de los parásitos al microscopio.

DOS FORMATOS DIFERENTES.

KIT 1. Con Formol / Acetato. Fijador habitual de parásitos.

KIT 2. Sin formol para minimizar el riesgo de contaminación ambiental.

KIT 1.

Código

1800402 Se suministran 72 unidades (24 bolsas con 3 unidades en cada bolsa)

1800404 Se suministran 100 unidades individuales.

KIT 2. Sin formol.

Código

1800400 Se suministran 72 unidades (24 bolsas con 3 unidades en cada bolsa)

1800401 Se suministran 100 unidades individuales.

Note: For centrifugation, Cencom 2 is recommended. Part number 7002240. See page 114

Nota: Para su centrifugación se recomienda la centrifuga Cencom 2. Código 7002240. Ver pág 142